

## Dominant Flex Chirurgische Absaugpumpe

### LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG



#### Leistungsstark

- Leistungsstarke Flussrate von bis zu 60 l/min bei flüsterleisem Betrieb von < 40 dB(A)\*
- Konstantes Vakuum – keine Schwankungen
- Schnell einsatzbereit

#### Zuverlässig

- Extreme Langlebigkeit
- In der Schweiz hergestellte, hochwertige Komponenten

## Unabhängig, leistungsstark und zuverlässig – eine starke Alternative zum Wandvakuum

Die Dominant Flex erfüllt fast alle Absauganforderungen im Krankenhaus, in der Klinik oder in der Arztpraxis. Sie entspricht den Anforderungen für die Herzchirurgie dank der Einstufung „Cardiac Floating“. Das Gerät stellt eine überzeugende Alternative zum Wandvakuum dar, da das unabhängige Vakuum ein Überlaufen in Wandsysteme vermeidet und gleichmäßiges, konsistentes und zuverlässiges Vakuum liefert. Das leistungsstarke Kolbenzylinder-System sorgt für einen flüsterleisen und beständigen Betrieb. Die Erstinvestition in diese Absaugpumpe rentiert sich schnell, da das Gerät viele Jahre zuverlässige Funktionsfähigkeit mit minimalen Wartungsanforderungen und langen Austauschzyklen bietet.

Die Dominant Flex bietet Flexibilität, wobei der Anwender zwischen hoher, mittlerer oder niedriger Durchflussrate wählen und so die Dauer für den Vakuumaufbau sowie den Geräuschpegel anpassen kann. Der hohe Flow und die Vakuumleistung machen das Gerät auch zu einem perfekten Absauggerät für die Liposuktion.

### Wichtige Merkmale auf einen Blick



#### Leistungsstark, aber leise

- ④ Leistungsstarke Antriebseinheit mit flüsterleisem Betrieb bei < 40 dB(A)\*.
- ⑤ Der patentierte Membran-Regulator sorgt für schnellen Vakuumaufbau.
- ⑥ Bei der Dominant Flex können Sie die nötige Flussrate selbst wählen.





#### Benutzerfreundliches Design für optimale Anwenderfreundlichkeit

- ⑦ Der mechanische Überlaufschutz schützt die Pumpe.
- ⑧ Die „Clean Touch“-Elemente und das Gehäuse ohne Vertiefungen oder Rillen ermöglichen eine einfache Reinigung und minimieren das Infektionsrisiko.
- ⑨ Der integrierte Fuß-Ein-/Aus-Schalter sorgt für freihändige Bedienung.



#### Lebenslange Haltbarkeit

- ① Die leistungsstarke Kolben-/Zylinder-Technologie bietet eine außerordentliche Beständigkeit.
- ② Medela verfügt über 50 Jahre Erfahrung und entwickelt robuste Geräte mit einer Garantie von 5 Jahren auf die gesamte Pumpe.
- ③ Patentierte Flachfedern reduzieren die mechanische Abnutzung.

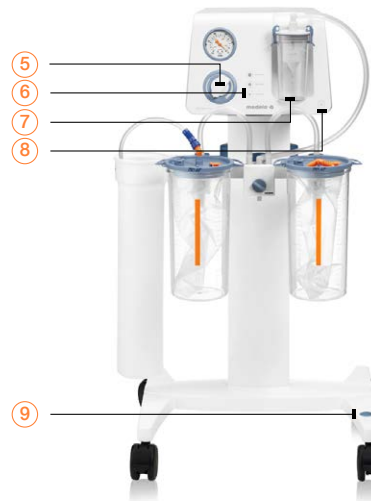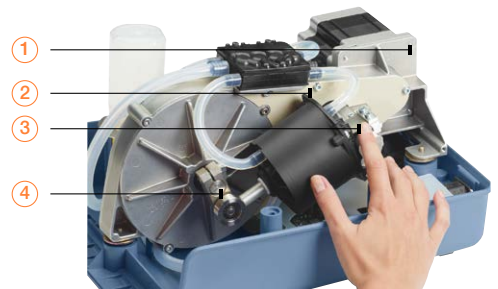

Als Einstiegslösung zum chirurgischen Absaugen bietet die **Basic Absaugpumpe von Medela** Anwenderfreundlichkeit und Langlebigkeit dank einfachem, einzigartigem Design (Hohes Vakuum – 90 kPa / 675 mmHg; Hoher Durchfluss: 30 l/min.).

Für mehr Mobilität sind **Rollstative** oder tragbare Versionen verfügbar. Die Auffangsysteme von Medela ergänzen die Pumpe und sorgen so für sicheres und leises Auffangen von Körperflüssigkeiten.

\*Daten bei der Medela AG verfügbar

### Technische Daten zur Dominant Flex



Hochvakuum  
– 95 kPa / 713 mmHg



9,3 kg (Rack-Version)  
20,5 lbs

5 Jahre Garantie



Hoher Durchfluss  
40/50/60 l/min.



H x B x T  
(Rack-Version)  
210 x 305 x 375 mm

Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.

**Medela AG**  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland  
www.medela.com

**Germany & Austria**  
Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Postfach 1148  
85378 Eching  
Germany  
Phone +49 89 31 97 59-0  
Fax +49 89 31 97 59 99  
info@medela.de  
www.medela.de

**Switzerland**  
Medela AG  
Lättichstrasse 7  
6341 Baar  
Switzerland  
Phone +41 848 633 352  
Fax +41 41 562 14 42  
contact@medela.ch  
www.medela.ch

Ihr Ansprechpartner vor Ort

